


自動Giga-Seal作成 自動Whole-Cell Patch-Clamp達成



NeoBiosystems 社製

ez-gSEAL 100B

コンピュータ制御プレッシャーシステム



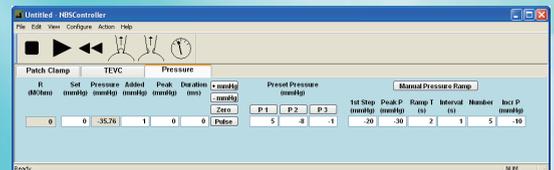


EZ-gSEAL 100Bは、プレッシャーコントローラであり、高精度の陽圧と陰圧の両方を提供できます。二つのエアポンプが内蔵しているので、エアポンプ等はいりません。

USBインターフェイスを介してコンピュータによって制御されます。ボタンをクリックすると、Giga-Sealの作成、もしくは、Whole-Cellまで自動的に達成、複雑なパッチクランプ実験を簡単に行います。さらに、正確で再現性にすぐれた装置となります。

薬剤のアプリケーションとして、指定された時間と圧力でプレッシャーパルスのコントロールができます。

プレッシャークランプとして、ストレッチチャンネル研究のために使用することができます。

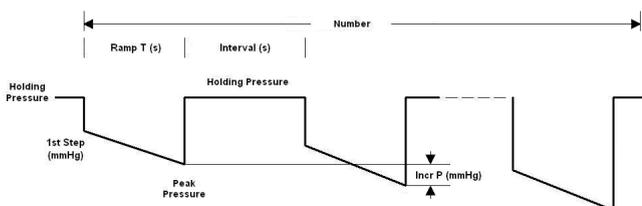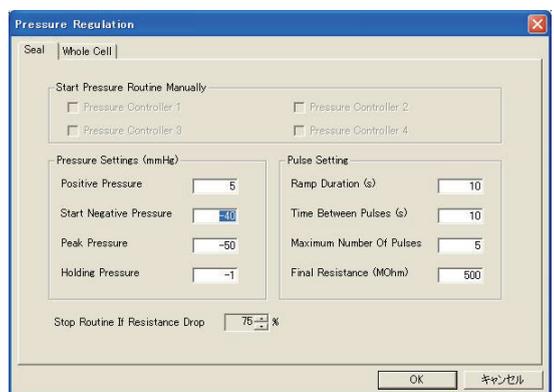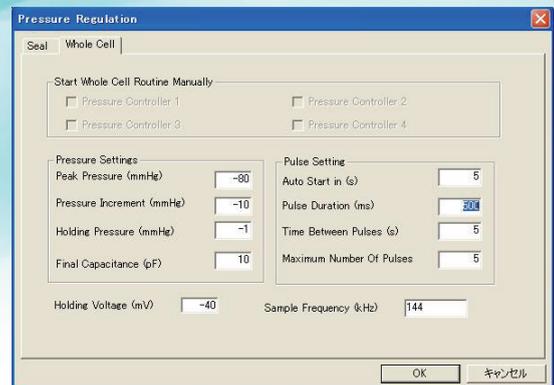

輸入・販売元

Inter Medical co.,ltd.
株式会社 インターメディカル

<本社> 〒464-0850 名古屋市千種区今池三丁目40番4号
TEL(052)731-8000 (代)/FAX(052)731-5050
website : <http://www.intermedical.co.jp/>
E-mail : info@intermedical.co.jp

<大阪営業所> 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島三丁目19番13号
第2ユヤマビル 4F-C
TEL(06)6885-5300 (代)/FAX(06)6195-7337
E-mail : osaka@intermedical.co.jp

※製品は、各社の登録商標、商標です。

